



ZERAMEX® P6 ZERABASE

Die Basis für individualisierte,
vollkeramische Versorgungen

ZERAMEX® **P6**



Wählen Sie den bevorzugten Weg zur individuellen, vollkeramischen Versorgung

Verschraubte, vollkeramische Versorgungen

Mit ZERAMEX® können Sie 100% metallfreien Zahnersatz mit hocheffizienten Arbeitsabläufen kombinieren. Die ZERAMEX® ZERABASE bietet Ihnen die Basis für Ihr individuell gestaltetes Abutment für okklusal verschraubte Versorgungen. Arbeiten Sie mit Ihrem bevorzugten Arbeitsprozess und verwenden Sie für digitale Arbeitsabläufe eine Exocad oder 3Shape Software.

Hohe Flexibilität

- Designen Sie das Abutment nach Ihren Wünschen
- Individuelle Gestaltung ermöglicht optimale Ästhetik
- Zementreste können einfach und sicher entfernt werden, da Präperationsgrenze ideal gestaltet werden kann
- Gestalten Sie den Aufbau so, dass eine ideale Kronenunterstützung und ein stabiler Halt erzielt wird
- Für verschraubte und zementierte Versorgungen geeignet



Arbeitsprozesse

Das ZERAMEX® ZERABASE Abutment ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem bevorzugten Arbeitsprozess zu arbeiten.

Konventioneller Arbeitsprozess

- Wax-up erstellen für gepresste oder gefräste Restaurationen

Digitaler Arbeitsprozess (digitales Design in Exocad oder 3Shape Software)

- Bearbeitetes Abutment → ohne Scanbody einscannen und Designerstellung in der Software
- Unbearbeitetes Abutment → Scanbody einscannen und Designerstellung in der Software

Produktion

Die Kappe bzw. Krone wird bei Ihnen im Labor, im Fräszentrum Ihrer Wahl oder chair-side gefräst.

Führende Software

Die ZERAMEX® ZERABASE Abutments sind in die marktführenden Systeme von Exocad und 3Shape integriert.

Exocad: Die Bibliothek wird automatisch mit den ZERAMEX® ZERABASE Abutments upgedatet.

Ausnahme: Systeme von Zirkozahn und Amann Girrbach benötigen manuellen Import der Files.

exocad

3Shape: Bitte laden Sie die Files von unserer Website und importieren Sie diese in Ihr System.

3shape 

Sie finden alle Files auf unserer Website: www.zra.mx/cadcam

Effiziente und flexible Versorgungen mit der ZERAMEX® ZERABASE

Features & Benefits



ZERABASE



Scanbody

ZERABASE Abutment


- Präzise, stabile ZERAMEX® Originalverbindung für hohe Stabilität
- Retentives Element und Phase zur präzisen Platzierung der Kappe oder der Krone
- Klebeflächen für optimalen Halt und Haftung der Versorgung

ZERAMEX® Scanbody


- Ideale Geometrie für präzise digitale Erfassung
- Stabiler Kunststoff für labortechnische Mehrfachverwendung
- Anzugsmoment Scanbody: max. 15 Ncm

Information: Wir bitten Sie den ZERAMEX® Scanbody nicht zu beschleifen, da die Möglichkeit besteht, dass das System diesen nicht mehr erkennen kann.

Passend für die gewünschte Indikation

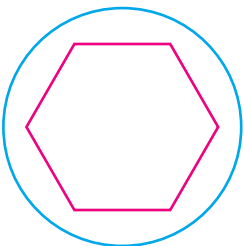

ZERABASE
für Krone

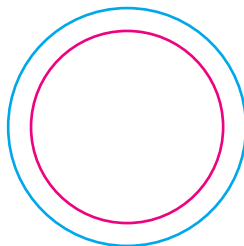

ZERABASE
für Brücken & Stege


ZERABASE für Kronen (engaging):

Der Sechskant sichert den Rotationsschutz auf dem Implantat

ZERABASE für Brücken und Stege (non-engaging):

Verbindung zum Implantat über eine zirkuläre Auflage, kein Sechskant

Verarbeitungshinweise und Material

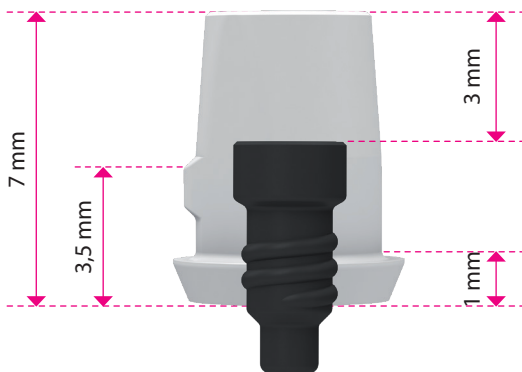

Verarbeitungshinweise

- Konischer Teil kann um 3mm gekürzt werden, bis Höhe Schraubenkopf
- Nur unter guter, durchgehender Kühlung mit leichtem Druck bearbeiten
- Hohe Drehzahl (Turbine) und feine Körnung (Rotringdiamant, kleiner 50 µm) verwenden
- finales Anzugsmoment Abutment (im Labor: Laborschraube verwenden):
 - RN: 35 Ncm
 - SN: 25 Ncm
- WAK Wert ZrO_2 ATZ: $9 \times 10^{-6}/K$
- Verklebung mit handelsüblichen Klebern

Material

- ZERABASE Abutments: Zirkondioxid, ATZ
- ZERAMEX® Scanbody: PEEK
- Schraube: VICARBO (karbonfaserverstärkter Kunststoff)

Das ZERAMEX® P6 CAD/CAM Portfolio auf einen Blick

Art.-Nr.	Produktname	SN Ø 4.0 mm	Art.-Nr.	Produktname	RN Ø 4.8 mm
P15530	ZERAMEX® P6 ZERABASE SN, für Krone (inkl. Schraube)		P16530	ZERAMEX® P6 ZERABASE RN, für Krone (inkl. Schraube)	
P15531	ZERAMEX® P6 ZERABASE SN, für Brücken / Stege (inkl. Schraube)		P16531	ZERAMEX® P6 ZERABASE RN, für Brücken / Stege (inkl. Schraube)	
P35514	ZERAMEX® P6 Scanbody SN (inkl. Schraube)		P36514	ZERAMEX® P6 Scanbody RN (inkl. Schraube)	

ZERAMEX®

strong. bright. right.

Bestellhotline DE/CH/AT

T 00800 93 55 66 37
F 00800 93 55 63 77
order@zeramex.com

Hauptsitz

Dentalpoint AG
Bodenackerstrasse 5
8957 Spreitenbach / Schweiz
T 0041 44 388 36 36
F 0041 44 388 36 39

Niederlassung Deutschland (Vertrieb EU)

Dentalpoint Germany GmbH
Wallbrunnstrasse 24
79539 Lörrach / Deutschland
T 0049 7621 1612 749
F 0049 7621 1612 780

info@zeramex.com
www.zeramex.com



+ swiss made

© 2016 Dentalpoint AG — All rights reserved.
ZERAMEX® is a registered trademark of Dentalpoint AG.
Exocad is a registered trademark of Exocad GmbH, Germany.
3Shape is a registered trademark of 3Shape A/S, Denmark.